



Der neue Hygoclave 50

Hygoclave 50

1. Der Hygoclave 50

- Features im Detail
- Zubehör
- Lieferumfang
- Technische Daten

Features im Detail



Bedienoberfläche

- Einfaches und **intuitives User Interface**
- **Farbcodierte Homescreen-Icons** erleichtern die Navigation durch die einzelnen Funktionen
- **Schnellzugriff via Homescreen** auf zuletzt durchgeführten Sterilisations- und Testzyklus




Bedienoberfläche

- Einfaches und **intuitives User Interface**
- **Farbcodierte Homescreen-Icons** erleichtern die Navigation durch die einzelnen Funktionen
- **Schnellzugriff via Homescreen** auf zuletzt durchgeführten Sterilisations- und Testzyklus

Komfort

Sicheres und komfortables Be- und Entladen der Sterilisationskammer durch **automatisches Türverriegelungssystem**

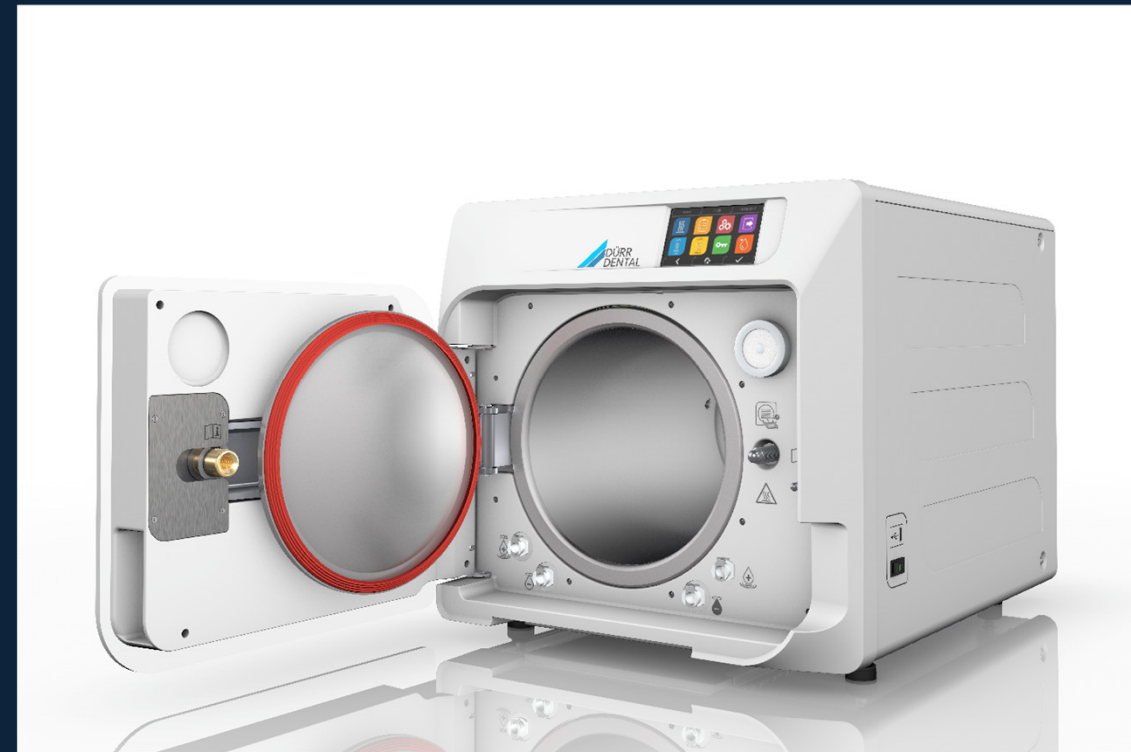



3-fach flexibel bei der Wasserversorgung

Komfortable und flexible Möglichkeiten zum Füllen und Entleeren der Wassertanks **dank frei zugänglicher Wassertanks und Wasseranschlüssen an der Vorder- und Rückseite**

Option 1 Manuelle Frischwasserversorgung

Manuelle Befüllung des Frischwassertanks durch frei zugängliche Tanks.

Dadurch

- optimaler Zugang für Inspektion und Wartung
- ideale Hygiene der Tanks



Benutzerfreundlichkeit

Option 2 Automatische Frischwasserversorgung

Rückseitiger Anschluss in Verbindung mit
Wasseraufbereitungsanlage (z. B.
Hygodem 90)

Dadurch

- Kein manuelles Nachfüllen notwendig
- **Automatische** Befüllung des Frischwassertanks, sobald Mindestfüllstand erreicht ist



Option 3
Semiautomatische
Frischwasserversorgung

Frontaler Anschluss in Verbindung mit
extra Frischwasserpumpe

- Zur Ansaugung aus Kanister in Frischwassertank




Hochleistungs-Sterilisationszyklus

Der zusätzliche **Standard B Plus-Zyklus** bietet **4 Evakuierungsstufen** während der Fraktionierungsphase

Vorteil:

- **zusätzliche Sicherheit** beim Entlüften der Kammer selbst bei komplizierten Hohlkörpern

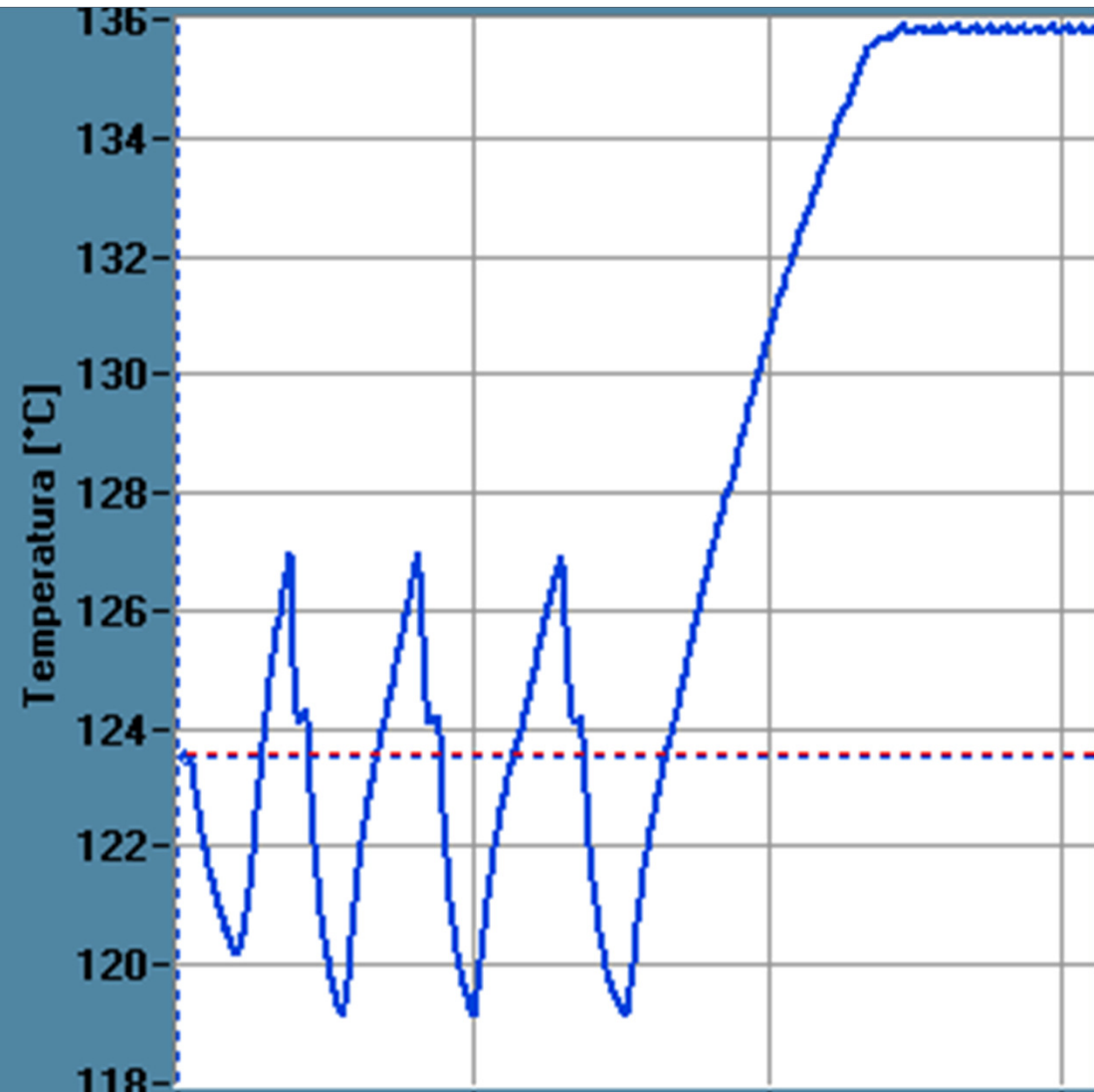


Leistungsstarke Trocknung


Premium Trocknungs-Technologie
mittels **Vakuumverfahren**

Vorteil:

- optimale Trocknungsergebnisse

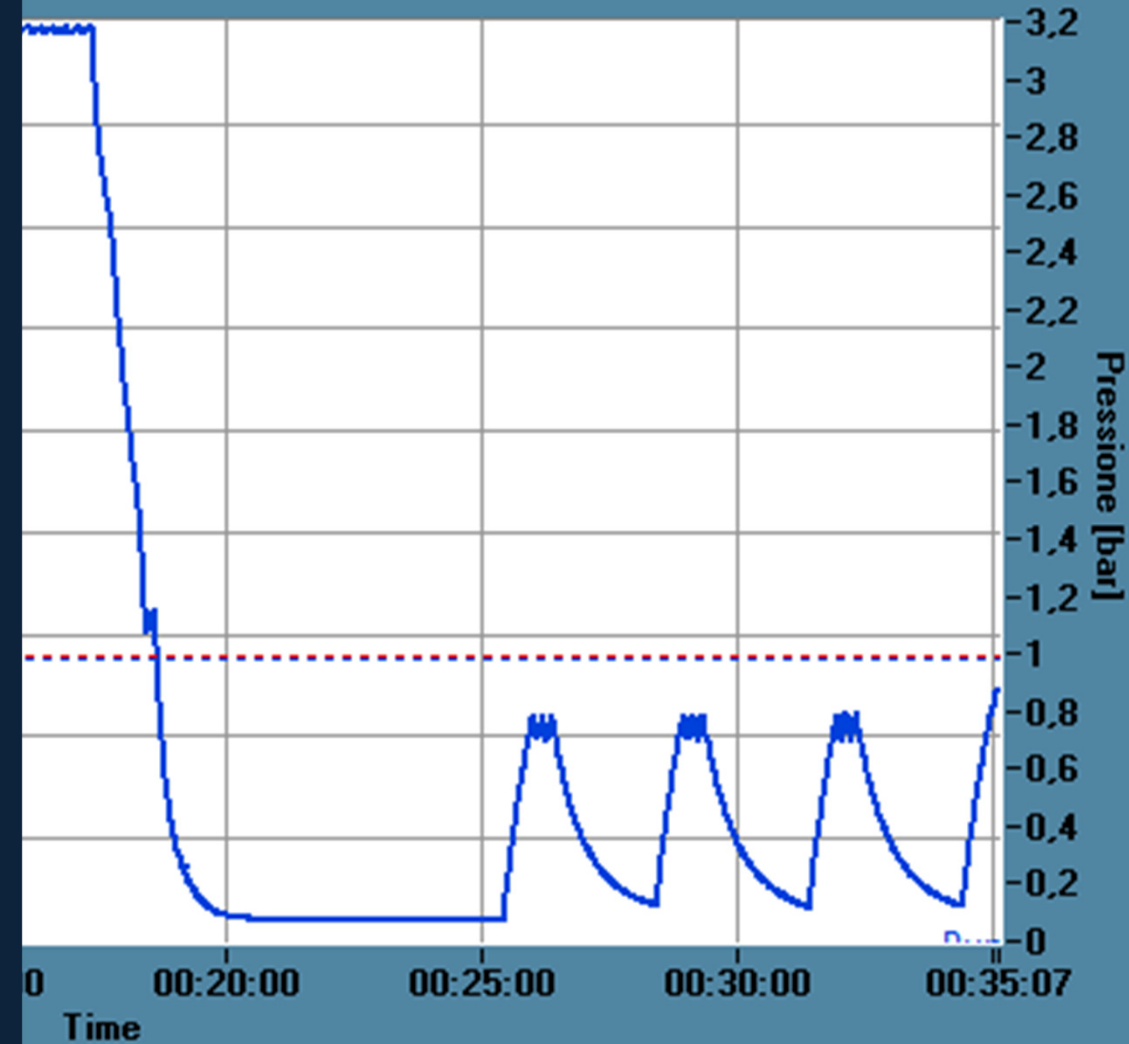

Robust und clever

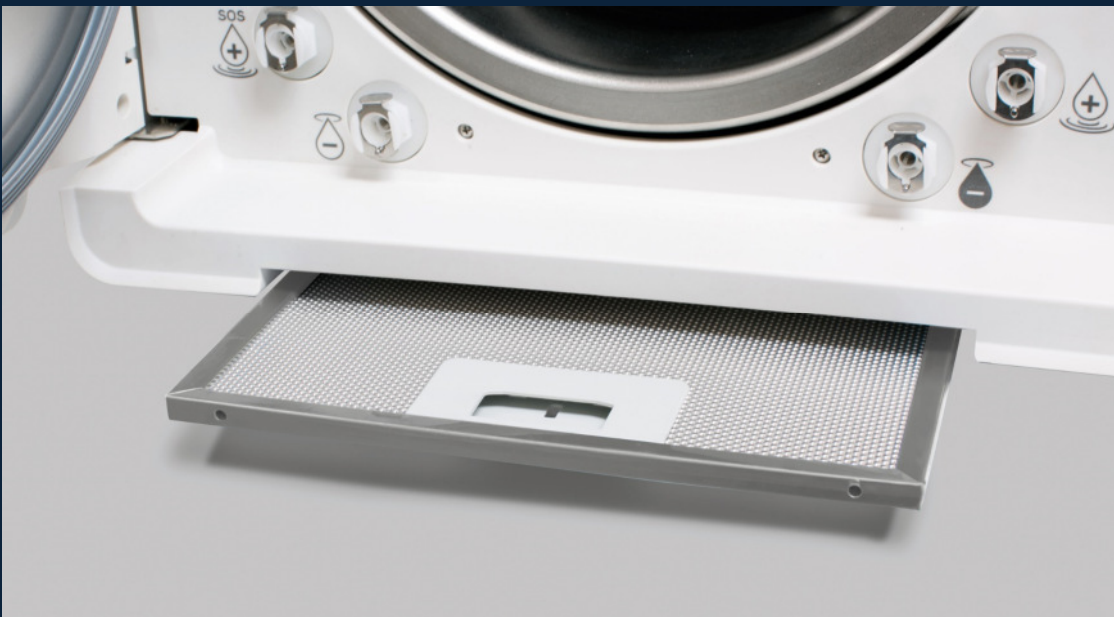

- Der leicht zugängliche und perfekt integrierte **Staubschutzfilter** schützt das Gerät wirksam vor Verunreinigungen aus der Umgebungsluft
- Die robuste **Edelstahlkammer** ist ideal für den Einsatz mit demineralisiertem Wasser geeignet


Komponenten-Check

Nützliche **Service-Funktionen** ermöglichen eine schnelle und komfortable Analyse des Geräts im Fehlerfall

Ansteuerung einzelner Komponenten per Knopfdruck




Servicefreundlichkeit

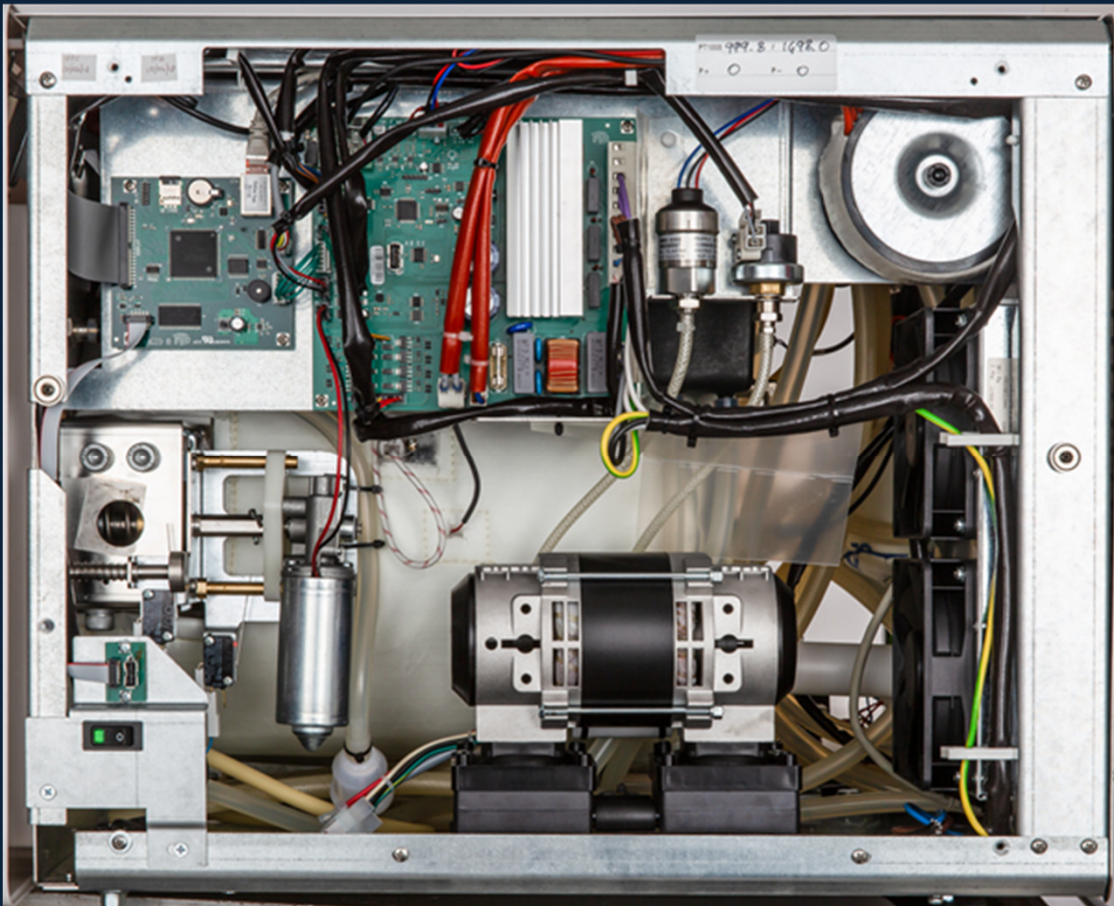

Servicefreundlich

Entwickelt nach den Anforderungen und Bedürfnissen von Servicetechnikern

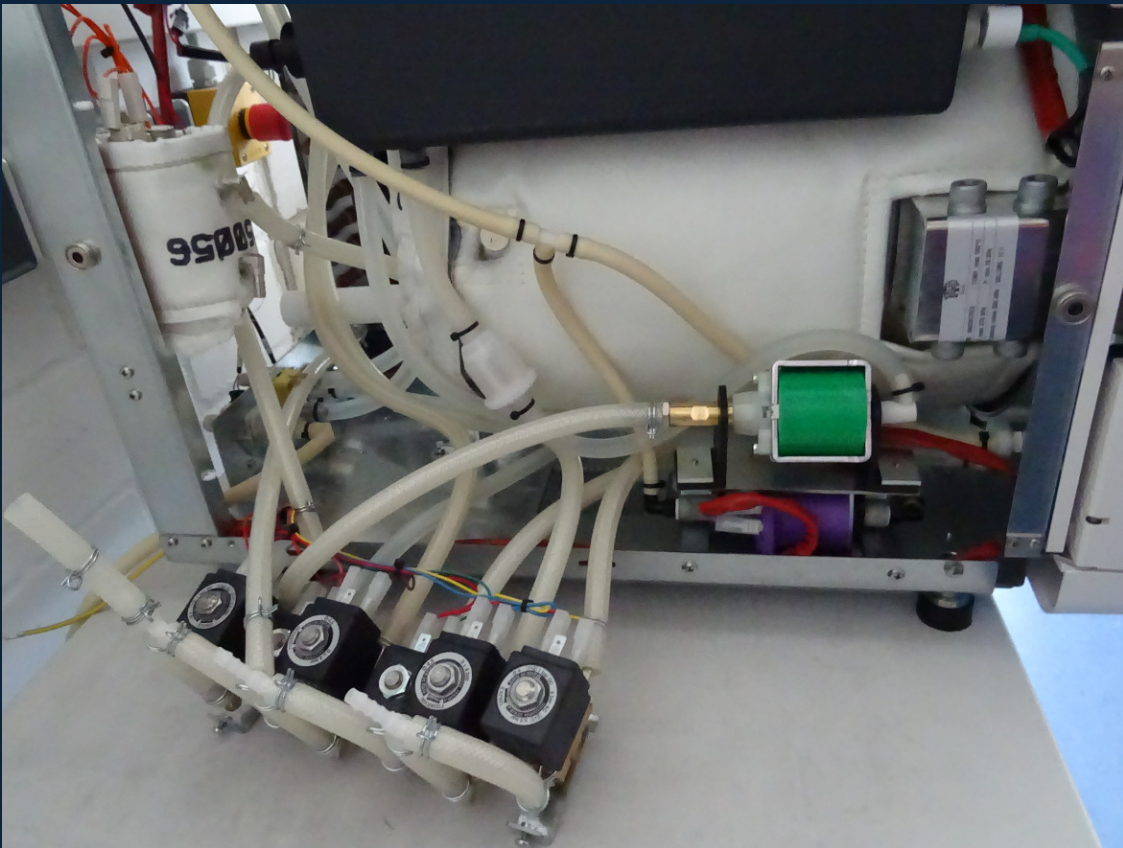

Servicefreundlich

Das Gerät bietet einen einfache, und **modulare Aufbau**

Vorteil:

- Schneller Aus- und Einbau von Komponenten auch vor Ort möglich

Dokumentation und Prozessüberwachung

- Schnittstelle zur Anbindung ins Praxisnetzwerk und Praxis-Management-Programmen
- Interne Speicherung von mehr als 100.000 Zyklusprotokollen
- Zusätzliche Möglichkeit zur Speicherung aller Zyklusprotokolle auf USB-Stick
- Zyklus-Validierungs-Bildschirm
 - Vergleich der Ist- und Soll-Werte am Ende des Zyklus auf dem Display



Der neue Hygoclave 50

Stand-Alone-Betrieb und ideale Hygiene dank vollständig zugänglicher Wassertanks



Intuitive, grafische Bedienoberfläche

Zusätzlicher „Standard B Plus-Zyklus“ mit 4 Vakuumstufen



Hochleistungs-Trocknungstechnologie für perfekte Trocknungsergebnisse



Schnittstelle zur Anbindung an Praxisnetzwerke und gängige Dokumentations-Programme



Servicefreundliche Architektur
- Modularer, einfacher Aufbau
- Servicefunktionen via GUI

Zubehör

Wasseraufbereitung

Dürr Dental
Wasseraufbereitungsanlagen
Hygodem 90 (Ionentauscher)
und **Hygopure 90**
(Umkehrosmose)



Chargenkontrolle

Hygotest Helix-Test

PCD (Process Challenge Device) und 250 Indikatoren



Dokumentation

Etikettendrucker zum
Ausdrucken von Etiketten mit
und ohne Barcode



Lieferumfang



- Tablett-Träger/Gestell (rotierbar: 5 Tablettts oder 3 Kassetten)
- 5 Tablettts
- Tablett-Griff
- Schmiermittel für Türverschluss
- 2 Schläuche zum Befüllen und Ablassen der Tanks

Technische Daten

	Dürr Dental HC 50 / 50 Plus
Kammervolumen	17 l / 22 l
Gewicht	57 kg / 61 kg
Geräteabmessungen (B x H x T) cm	49.3 x 48.4 x 65.4
Max. Anzahl Fraktionierungs-stufen	4
Bedienoberfläche	Farb- Touch-Display
Türmechanismus	Automatisch
Konnektivität	VistaSoft Monitor ready
Dokumentation	USB, Ethernet, ext. Drucker
Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"> • Integr. Staubschutzfilter • Kompatibel mit Hygodem 90 und Hygopure 90
Listenpreis (Deutschland)	7.150 EUR / 7.650 EUR